

beurer

PS 240



DE Personenwaage

Gebrauchsanweisung

EN Personal bathroom scale

Instruction for Use

FR Pèse-personne

Mode d'emploi

ES Báscula de baño

Instrucciones para el uso

IT Bilancia pesapersone

Instruzioni per l'uso

TR Terazi

Kullanma Talimatı

RU Напольные весы

Инструкция по применению

PL Waga łazienkowa

Instrukcja obsługi

NL Personenweegschaal

Gebruikershandleiding

PT Balança de casa-de-banho

Instruções de utilização

EL Ζυγαριά

Οδηγίες χρήσεως

DA Personvægt

Betjeningsvejledning

SV Personvåg

Bruksanvisning

NO Personvekt

Bruksveiledning

FI Henkilövaaka

Käyttöohje

CS Osobní váha

Návod k použití

SL Osebna tehtnica

Navodila za uporabo

HU Személymérleg

Használati utasítás

RO Cântar pentru persoane

Instrucțiuni de utilizare

SK Osobná váha

Návod na obsluhu

AR ميزان الأشخاص

دليل الاستعمال

CE


1. Inbetriebnahme

EN Getting started
FR Mise en service
ES Puesta en marcha
IT Messa in funzione
NL Ingebruikname

PT Coloção em funcionamento
TR İlk çalışma
EL Έναρξη λειτουργίας
DA Ibrugtagning
SV Börja använda vågen

NO Bruk
FI Käyttöönotto
RU Ввод в эксплуатацию
PL Uruchomienie
CS Uvedení do provozu
SL Prvi vklop


HU Üzembe helyezés
RO Punerea în funcțiune
SK Uvedenie do prevádzky
AR التشغيل

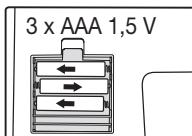

DE Batterie einlegen oder Isolierschutzstreifen entfernen.
EN Insert batteries or remove insulating strip.
FR Insérez les piles ou retirez la bande de protection isolante.
ES Colocar las pilas o quitar las tiras de protección de aislamiento.
IT Inserire le batterie o rimuovere la linguetta di protezione.
NL Plaats de batterij of verwijder de isolatieband.
PT Colocar a pilha ou retirar a fita de isolamento.

TR Pilis takin veya izole koruma bandını çıkartın.
EL Τοποθετήστε τη μπαταρία ή αφαιρέστε την προστατευτική ταινία μόνωσης.
DA Indsæt batteri eller fjern isoleringsstrim-mel.
SV Lägg in batteriet eller ta bort skyddsrem-sorna.
NO Sett inn batteri eller fjern isoleringsstri-pene.
FI Aseta paristo paikal-leen ja poista eristys-suojanauha.
RU Вставьте батарейку или удалите защитную изоляционную полоску.


PL Włożyć baterię lub usunąć ochronny pasek izolacyjny.
CS Vložte baterii nebo odstraňte izolační proužek.
SL Vstavite baterijo ali odstranite izolirni zaščitni trak.
HU Helyezze be az ele-met, vagy távolítsa el a szigetelőcsíkot.
RO Introducerea bateriilor sau scoaterea benzi-lor de protecție pentru izolare.
SK Vložte batériu alebo odstraňte izolačnú pásku.
AR قم بداخل البطاريات أو قم بإزالة أشرطة الحماية العازلة.

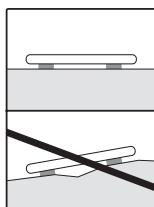

DE Waage auf einen ebe-nen und festen Boden stellen.
EN Place the scale on a secure, flat surface.
FR Posez la balance sur un sol plat et dur.
ES Colocar la báscula sobre un suelo plano y estable.
IT Posizionare la bilancia su un fondo piano e solido.
NL Plaats de weegschaal op een vlakke en vaste ondergrond.
PT Colocar a balança sobre piso nivelado e firme.

TR Teraziyi düz ve sağ-lam bir yüzey üzerine koyn.
EL Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
DA Stil vægten på et jævnt, fast gulv.
SV Placera vägen på ett jämnt och fast under-lag.
NO Plasser vekten på et jævnt og fast under-lag.
FI Aseta vaaka tasaiselle ja tukevalle alustalle.
RU Установить весы на прочную ровную поверхность.


PL Ustaw wagę na twar-dym i płaskim podłożu.
CS Postavte váhu na pevný a rovný podklad.
SL Tehnico postavite na čvrsto podlago oz. tla.
HU Állítsa a mérlegeget szilárd, vízszintes felületre.
RO Așezați cânțarul pe o podea fixă netedă.
SK Postavte váhu na rovný a pevný podklad.
AR وضع الميزان على أرضية صلبة ومستوية.

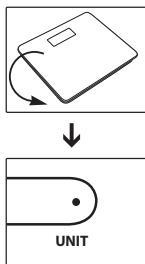

DE Waage ist umschaltbar (kg/lb/st).	TR Terazi modu değiştirilebilir (kg/lb/st).	PL Istnieje możliwość zmiany jednostek wagi (kg/lb/st).
EN Scales can be switched to alternative units of measurement (kg/lb/st).	EL Η ζυγαριά μπορεί να τεθεί σε λειτουργία (kg/lb/st).	CS Váhu lze přepínat (kg/lb/st).
FR La balance est réglable (kg/lb/st).	DA Vægten kan omstilles (kg/lb/st).	SL Tehnico je moč preklapljati (kg/lb/st).
ES La báscula es comutable (kg/lb/st).	SV Vägen går att ställa om (kg/lb/st).	HU A mérleg bekapcsolható (kg/lb/st).
IT La bilancia è commutabile (kg/lb/st).	NO Vekten kan stilles om (kg/lb/st).	RO Cântarul prezintă posibilitatea de comutare între trepte (kg/lb/st).
NL De weegschaal is omschakelbaar (kg/lb/st).	FI Mittayksikön voi valita (kg/lb/st).	SK Váha je prepínatelná (kg/lb/st).
PT A balança é comutável (kg/lb/st).	RU Весы переключаются (kg/lb/st).	AR الميزان قابل للتحويل (kg/lb/st)

2. Wiegen

EN Weighing
FR Pesée
ES Pesado
IT Pesatura
NL Wegen

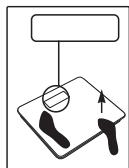

Quickstart

PT Pesar
TR Tartma
EL Ζύγιση
DA Vejning
SV Vägning

DE Waage betreten.
EN Step onto the scale.
FR Montez sur le pèse-personne.
ES Súbase a la báscula.
IT Salire sulla bilancia.
NL Stap op de weegschaal.



NO Foreta veiing
FI Punnitus
RU Взвешивание
PL Ważenie
CS Vážení

PT Subir para a balança.
TR Teraziye çıkarın.
EL Ανεβείτε στην ζυγαριά.
DA Træd op på vægten.
SV Ställ dig på vägen.
NO Gå opp på vekten.
FI Astu vaa'alle.
RU Встать на весы.

SL Tehtanje
HU Mérés
RO Cânțările
SK Váženie
CS Vážení

الوزن

PL Wejdź na wagę.
CS Stoupněte si na váhu.
SL Stopite na tehtnico.
HU Álljon rá a mérlegre.
RO Așezați-vă pe cânțar.
SK Postavte sa na váhu.
AR الوقف على الميزان.

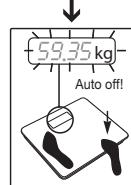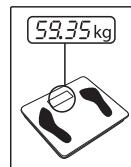


DE Stehen Sie während des Messvorgangs still!
EN Stand still whilst being weighed!
FR Ne bougez pas pendant la mesure !
ES ¡Durante el proceso de medición permanezca quieto!
IT Restare fermi durante il processo di pesatura!
NL Sta stil tijdens het wegen.

PT Não se mexa durante o processo de pesagem!
TR Tartma esnasında hareketsiz durun!
EL Σταθείτε ακίνητος κατά τη διαδικασία μέτρησης!
DA Stå stille under vejningen!
SV Stå stilla under mätningen!
NO Stå stille mens veiingen pågår!
FI Seiso punnitukseen aikana liikkumatta.

RU Во время взвешивания стойте неподвижно!


PL Podczas ważenia należy stać bez ruchu!
CS Během vážení stojte tisí!
SL Med tehtanjem stoje mirno!
HU A mérés idején álljon nyugodtan!
RO În timpul procesului de măsurare stați nemîșcat(ă)!
SK Počas merania stojte pokojne!
AR قف أثناء عملية القياس في وضع ساكن!

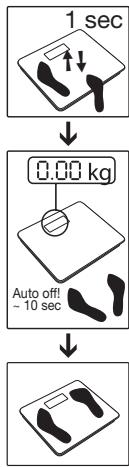


DE Hinweis: Bei Erstbenutzung und Standortwechsel.	EL Υπόδειξη: Κατά την πρώτη χρήση και τη μετακίνηση.	CS Upozornění: V případě prvního použití a změny místa.
EN Note: for first use and relocation.	DA Bemærk: Ved første ibrugtagning og ændring af vægterns placering.	SŁ Napotek: Pri prvi uporabi in menjavi mesta postavitev.
FR Remarque : Première utilisation et changement de place.	SV Anvisning: Vid första användningen och vid platsbyte.	HU Megjegyzés: első használat / helyváltoztatás esetén.
ES Indicación: para usarla por primera vez o cambiarla de sitio.	NO Merk: Ved første-gang bruk og ved flytting av vekten.	RO Indicație: La prima utilizare și schimbarea locației.
IT Avvertenza: al primo utilizzo e in caso di spostamento	FI Neuvo: Ensimmäisellä käytökkällä ja vaa'an siiron jälkeen.	SK Upozornenie: Pri prvom používaní a zmene polohy.
NL Aanwijzing: Voor het eerste gebruik of verplaatsing.	RU Примечание: При первом использовании и изменении положения весов.	AR ارشاد: عند أول استخدام وتغيير الموضع.
PT Nota: Para a primeira utilização e mudança do local de utilização.	PL Wskazówka: przy pierwszym użyciu i po przestawieniu w inne miejsce.	

3. Fehlermeldung

EN Error messages
FR Messages d'erreur
ES Avisos de errores
IT Messaggi di errore
NL Foutmeldingen
PT Mensagens de erro

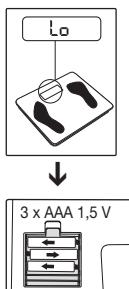

TR Hata mesajları	FI Virheilmoitukset	HU Hibajelzések
EL Μηνύματα σφαλμάτων	RU Сообщения об ошибках	RO Mesaje de eroare
DA Fejlmeddelelse	PL Komunikaty błędów	SK Chybová hlásenie
SV Felmeddelanden	CS Chybová hlášení	AR بلاغ الخطأ
NO Feilmeldinger	SL Javljene napake	
DE Batterie leer	EL Η μπαταρία είναι άδεια	PL Zużyta bateria
EN Battery empty	DA Batteri tomt	CS Vybité baterie
FR Batterie vide	SV Batteriet tomt	SL Baterijski vložki so prazni
ES Pilas agotadas	NO Batteri tomt	HU Az elem lemerült
IT Batterie esauste	FI Paristo tyhjä	RO Baterie descărcată
NL Batterij leeg	RU Батарейка разряжена	SK Batéria je vybitá
PT Bateria descarregada		AR البطارية فارغة الشحنة
TR Pil boş		

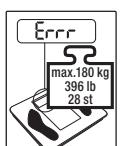

DE Maximale Tragkraft überschritten	TR Maksimum taşıma kapasitesinin üzerine çıktıınız	RU Превышен максимальный вес
EN Maximum weight capacity exceeded	EL Υπέρβαση ανώτατου ορίου αντοχής	PL Przekroczone maksymalną nośność
FR Poids maximal dépassé	DA Maksimal bærekraft overskredet	CS Překročení maximální nosnosti
ES Capacidad de carga máxima superada	SV Den maximala bärkraften är överskriden	SL Prekorakena je maksimalna nosilnost
IT Superamento della portata massima	NO Maksimumsvekten er overskredet	HU Túllépte a maximális teherbírást
NL Maximale draagkracht overschreden	FI Maksimipaino ylitti	RO S-a depășit capacitatea portantă maximă.
PT Capacidade de carga máxima ultrapassada		SK Maximálna nosnosť bola prekročená

DE Allgemeine Hinweise

- Belastbarkeit beträgt max. 180 kg (396 lb / 28 st), Ein teilung 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- **Reinigung:** Sie können die Waage mit einem ange feuchtenen, fusselfreien Tuch reinigen. Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch niemals unter fließendem Wasser ab.
- Schützen Sie die Waage vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen, elektromagnetischen Feldern und zu nahen Wärmequellen.
- Steigen Sie nie einseitig auf den äußersten Rand der Waage: Kippgefahr!
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern!
- Nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.
- Sollten Sie noch Fragen zur Anwendung unserer Geräte haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den Kundenservice.
- Prüfen Sie vor jeder Reklamation die Batterien und wechseln Sie diese ggf. aus.
- Reparaturen dürfen nur vom Kundenservice oder autorisierten Händlern durchgeführt werden.


Hinweise zum Umgang mit Batterien

- Wenn Flüssigkeit aus einer Batteriezelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
- **Verschluckungsgefahr!** Kleinkinder könnten Batterien verschlucken und daran erstickten. Daher Batterien für Kleinkinder unerreichbar aufzubewahren!
- Auf Polaritätskennzeichen Plus (+) und Minus (-) achten.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme.

- ### Explosionsgefahr!
- Keine Batterien ins Feuer werfen.
- Batterien dürfen nicht geladen oder kurzgeschlossen werden.
 - Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts die Batterien aus dem Batteriefach nehmen.
 - Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
 - Immer alle Batterien gleichzeitig auswechseln.
 - Keine Akkus verwenden!
 - Keine Batterien zerlegen, öffnen oder zerkleinern.

Batterie Entsorgung

- Die verbrauchten, vollkommen entladenen Batterien müssen Sie über speziell gekennzeichnete Sammelbehälter, Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändler entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Batterien zu entsorgen.
- Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
Pb = Batterie enthält Blei,
Cd = Batterie enthält Cadmium,
Hg = Batterie enthält Quecksilber

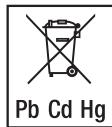

Allgemeine Entsorgung

- Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entfernt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik

Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.



Verpackung umweltgerecht entsorgen

Garantie / Service

Wir leisten 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die Garantie gilt nicht:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- Bei Eigenverschulden des Kunden.
- Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Beurer GmbH, Ulm (Germany) geltend zu machen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:

Service Hotline:

Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144

E-Mail: kd@beurer.de

www.beurer.com

Fordern wir Sie zur Übersendung des defekten Produktes auf, ist das Produkt an folgende Adresse zu senden:

Beurer GmbH

Servicecenter

Lessingstraße 10 b

89231 Neu-Ulm

Germany

Irrtum und Änderungen vorbehalten

EN General advice

- Max. capacity 180 kg (396 lb / 28 st), Graduation 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- **Cleaning:** You can clean the scale with a damp, cloth using a little washing-up liquid if necessary. Never immerse the scale in water or rinse it under running water.
- Protect the scale against knocks, damp, dust, chemicals, drastic changes in temperature, electromagnetic fields and sources of heat that are too near.
- Never step onto the outer edge of the scale with one foot as this could cause the scales to tip!
- Keep packaging material away from children!
- Not intended for commercial use.
- Should you have any questions regarding operation and usage of our appliances, please contact your local retailers or Customer Service.
- Before making a claim, please check the batteries and replace them if necessary.
- Repairs must only be carried out by Customer Services or authorised suppliers.

Notes on handling batteries

- If your skin or eyes come into contact with battery fluid, flush out the affected areas with water and seek medical assistance.

- ### Choking hazard!
- Small children may swallow and choke on batteries. Store the batteries out of the reach of small children.

- Observe the plus (+) and minus (-) polarity signs.
- If a battery has leaked, put on protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth.
- Protect the batteries from excessive heat.

- ⚠ Risk of explosion!** Never throw batteries into a fire.
- Do not charge or short-circuit batteries.
 - If the device is not to be used for a long period, take the batteries out of the battery compartment.
 - Use identical or equivalent battery types only.
 - Always replace all batteries at the same time.
 - Do not use rechargeable batteries.
 - Do not disassemble, split or crush the batteries.

⚠ Battery disposal

- The empty, completely flat batteries must be disposed of through specially designated collection boxes, recycling points or electronics retailers. You are legally required to dispose of the batteries.
- The codes below are printed on batteries containing harmful substances:
Pb = Battery contains lead,
Cd = Battery contains cadmium,
Hg = Battery contains mercury



⚠ General disposal

- For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its useful life. Dispose of the unit at a suitable local collection or recycling point. Dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.

Dispose of packaging in an environmentally friendly manner.



Warranty / service

In case of a claim under the warranty please contact your local dealer or the local representation which is mentioned in the list "service international".

In case of returning the unit please add a copy of your receipt and a short report of the defect.

The following warranty terms shall apply:

1. The warranty period for BEURER products is either 5 years or if longer the country specific warranty period from date of Purchase.
In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
2. Repairs (complete unit or parts of the unit) do not extend the warranty period.
3. The warranty shall not be valid for damages because of a. improper treatment, e.g. nonobservance of the user instructions.
b. repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
c. transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
d. The warranty shall not be valid for accessories which are subject to normal wear and tear (cuff, batteries etc.).
4. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

Subject to error and change

FR Conseils d'ordre général

- Résistance jusqu'à 180 kg (396 lb / 28 st), Graduation 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- **Nettoyage :** Vous pouvez nettoyer le pèse-personne à l'aide d'un chiffon non pelucheux légèrement humide. Ne plongez jamais la balance dans l'eau. Ne la nettoyez jamais sous l'eau courante.
- Protégez la balance contre les coups, l'humidité, la poussière, les produits chimiques, les fortes variations de température, les champs électromagnétiques et les sources de chaleur trop proches.
- Ne vous tenez jamais sur le bord extérieur de la balance : danger de basculement !
- Eloignez les enfants du matériel d'emballage !
- Non prévue pour un usage industriel.
- Pour toute question concernant l'utilisation de nos appareils, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente de.
- Avant toute réclamation, vérifiez l'état des batteries et changez-les si elles sont échauffées.
- Seul le service client ou un opérateur autorisé peut procéder à une réparation.

⚠ Remarques relatives aux piles

- Si du liquide de la cellule de pile entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.


- ⚠ Risque d'ingestion !** Les enfants en bas âge pourraient avaler des piles et s'étouffer. Veuillez donc conserver les piles hors de portée des enfants en bas âge !
- Respectez les signes de polarité plus (+) et moins (-).
 - Si la pile a coulé, enfilez des gants de protection et nettoyez le compartiment à piles avec un chiffon sec.
 - Protégez les piles d'une chaleur excessive.

⚠ Risque d'explosion ! Ne jetez pas les piles dans le feu.

- Les piles ne doivent être ni rechargées, ni court-circuitées.
- En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, sortez les piles du compartiment à piles.
- Utilisez uniquement des piles identiques ou équivalentes.
- Remplacez toujours l'ensemble des piles simultanément.
- N'utilisez pas d'accumulateur !
- Ne démontez, n'ouvrez ou ne cassez pas les piles.

⚠ Élimination des piles

- Les piles usagées et complètement déchargées doivent être mises au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage ou bien déposées chez un revendeur d'appareils électriques. L'élimination des piles est une obligation légale qui vous incombe.
- Ces pictogrammes se trouvent sur les piles à substances nocives :
Pb = pile contenant du plomb,
Cd = pile contenant du cadmium,
Hg = pile contenant du mercure.

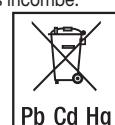

⚠ Élimination générale

- Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays. Veuillez éliminer l'appareil conformément à la directive européenne – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equip-



ment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.

Emballage à trier.



Garantie / Maintenance

Pour toute demande de garantie, veuillez contacter votre revendeur local ou la succursale locale (cf. la liste « Service client à l'international »).

Lorsque vous retournez l'appareil, assurez-vous d'y joindre une copie de votre preuve d'achat et une brève description du défaut.

Les conditions de garantie suivantes s'appliquent :

1. La période de garantie des produits BEURER est de 5 ans ou, si elle est plus longue, elle est applicable dans le pays concerné à compter de la date d'achat.
Pour toute demande de garantie, vous devez prouver la date d'achat par une preuve d'achat ou une facture.
2. Les réparations (appareil complet ou pièces détachées) ne prolongent pas la période de garantie.
3. La garantie n'est pas valable en cas de dommages dus :
 - a. à une utilisation inappropriée, par exemple le non-respect des instructions par l'utilisateur ;
 - b. à des réparations ou des modifications réalisées par le client ou par une personne non autorisée ;
 - c. au transport du fabricant chez le client ou pendant le transport jusqu'au service client ;
 - d. pour les accessoires soumis à une usure naturelle (bras-sard, piles, etc.).
4. Toute responsabilité liée aux dommages consécutifs directs ou indirects causés par l'appareil est exclue même si un droit de garantie est reconnu en cas de dommage à l'appareil.

Sous réserve d'erreur et de modifications

ES Indicaciones generales

- La capacidad de carga es de máx. 180 kg (396 lb / 28 st). Precisión 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- **Limpieza:** limpíe la báscula con un paño sin pelusas ligeramente humedecido. No sumerja nunca la balanza, ni la lave bajo un chorro de agua.
- Proteja la báscula de golpes, humedad, polvo, sustancias químicas, grandes cambios de temperatura, campos electromagnéticos y de la cercanía de fuentes de calor.
- Nunca suba por un sólo lado sobre el borde exterior de la báscula: ¡peligro de vuelco!
- Mantenga a los niños alejados del material de embalaje.
- Dispositivo no previsto para el uso industrial.
- Si todavía tuviese preguntas sobre la utilización de nuestros aparatos, sírvase dirigirse a nuestro representante o al servicio técnico de de.
- Antes de cada reclamo controle las pilas y en caso de que fuese necesario cámbielas.
- Las reparaciones sólo deben ser realizadas por el servicio al cliente o comerciantes autorizados.

⚠ Indicaciones para la manipulación de pilas

- En caso de que el líquido de las pilas entre en contacto con la piel o los ojos, lave la zona afectada con agua y busque asistencia médica.
- ⚠ **¡Peligro de asfixia!** Los niños pequeños podrían tragarse las pilas y asfixiarse. Guarde las pilas fuera del alcance de los niños.
- Fíjese en los símbolos más (+) y menos (-) que indican la polaridad.

- Si se derrama el líquido de una pila, póngase guantes protectores y límpie el compartimento de las pilas con un paño seco.

- Proteja las pilas de un calor excesivo.

⚠ **¡Peligro de explosión!** No arroje las pilas al fuego.

- Las pilas no se pueden cargar ni cortocircuitar.
- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas del compartimento.
- Utilice únicamente el mismo tipo de pila o un tipo equivalente.
- Cambie siempre todas las pilas a la vez.
- ¡No utilice baterías!
- No despiece, abra ni triture las pilas.

⚠ Eliminación de las pilas

- Las pilas usadas, completamente descargadas, deben eliminarse a través de contenedores de recogida señalados de forma especial, los puntos de recogida de residuos especiales o a través de los distribuidores de equipos electrónicos. Los usuarios están obligados por ley a eliminar las pilas correctamente.
- Estos símbolos se encuentran en pilas que contienen sustancias tóxicas:
Pb = la pila contiene plomo,
Cd = la pila contiene cadmio,
Hg = la pila contiene mercurio.



⚠ Eliminación general

- Para proteger el medio ambiente no se debe desechar el aparato al final de su vida útil junto con la basura doméstica. Se puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles en su zona. Deseche el aparato según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para más información, póngase en contacto con la autoridad municipal competente en materia de eliminación de residuos.



Elimine el embalaje respetando el medio ambiente.



Garantía / Asistencia

En caso de reclamaciones en el marco de la garantía diríjase a su distribuidor local o a la delegación local (ver lista „Service international“).

Cuando nos envíe el aparato, adjunte una copia del recibo de compra y una breve descripción del problema.

Se aplican las siguientes condiciones de garantía:

1. El periodo de garantía para productos de BEURER es de 5 años o, si es superior, se aplica el periodo de garantía vigente en el país correspondiente a partir de la fecha de compra. En caso de una reclamación de la garantía, la fecha de compra deberá demostrarse con el recibo de compra o una factura.
2. Las reparaciones (todo el aparato o solo algunas piezas) no hacen que se prolongue el periodo de garantía.
3. La garantía no tiene validez para daños debidos a:
 - a. Uso indebido, p. ej. si no se siguen las instrucciones de uso.
 - b. Reparaciones o cambios realizados por el cliente o por una persona no autorizada.
 - c. Transporte del fabricante al cliente o durante el transporte al centro de servicio.
 - d. La garantía no tiene validez para accesorios sometidos al desgaste habitual (brazalete, pilas, etc.).
4. La responsabilidad por daños derivados directos o indirectos provocados por el aparato también queda excluida incluso si se reconoce una reclamación de la garantía en caso de daño del aparato.

Salvo errores y modificaciones

IT Indicazioni generali

- Portata max. 180 kg (396 lb / 28 st), Graduazione 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- **Pulizia:** per pulire la bilancia utilizzare un panno leggermente umidito, privo di pelucchi e. Non immergere mai la bilancia in acqua, né lavarla sotto l'acqua corrente.
- Non esporre la bilancia a urti, umidità, polvere, prodotti chimici, forti sbalzi di temperatura, campi elettromagnetici e fonti di calore troppo vicine.
- Non salire mai sul bordo esterno della bilancia e solo su un lato: pericolo di ribaltamento!
- Tenere lontani i bambini dal materiale d'imballaggio!
- Non adattata all'utilizzo commerciale.
- In caso di dubbi o domande circa l'impiego delle nostre apparecchiature, rivolgersi al rivenditore o al servizio clienti.
- Prima di inoltrare eventuali reclami, testare le batterie e se necessario sostituirle.
- Le riparazioni possono essere effettuate solo dal Servizio clienti o da rivenditori autorizzati.

⚠️ Avvertenze sull'uso delle batterie

- Se il liquido della batteria viene a contatto con la pelle e con gli occhi, sciacquare le parti interessate con acqua e consultare il medico.

- ⚠️ **Pericolo d'ingestione!** I bambini possono ingerire le batterie e soffocare. Tenere quindi le batterie lontano dalla portata dei bambini!
- Prestare attenzione alla polarità positiva (+) e negativa (-).
- In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, indossare guanti protettivi e pulire il vano batterie con un panno asciutto.
- Proteggere le batterie dal caldo eccessivo.

- ⚠️ **Rischio di esplosione!** Non gettare le batterie nel fuoco.
- Le batterie non devono essere ricaricate o mandate in cortocircuito.
- Qualora l'apparecchio non dovesse essere utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie dal vano batterie.
- Utilizzare solo tipologie di batterie uguali o equivalenti.
- Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.
- Non utilizzare batterie ricaricabili!
- Non smontare, aprire o frantumare le batterie.

⚠️ Smaltimento delle batterie

- Smaltire le batterie esauste e completamente scariche negli appositi punti di raccolta, nei punti di raccolta per rifiuti tossici o presso i negozi di elettronica. Lo smaltimento delle batterie è un obbligo di legge.
- I simboli riportati di seguito indicano che le batterie contengono sostanze tossiche:
Pb = batteria contenente piombo
Cd = batteria contenente cadmio
Hg = batteria contenente mercurio.



⚠️ Smaltimento in generale

- A tutela dell'ambiente, al termine del suo utilizzo l'apparecchio non deve essere smaltito nei rifiuti domestici. Lo smaltimento deve essere effettuato negli appositi centri di raccolta. Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento.

Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente.



Garanzia / Assistenza

Per rivendicazioni nell'ambito della garanzia, rivolgersi al rivenditore locale o alla sede locale (vedere l'elenco „Service international“).

Allegare al reso dell'apparecchio una copia della prova d'acquisto e una breve descrizione del difetto.

Si applicano le seguenti condizioni di garanzia:

1. La garanzia dei prodotti BEURER dura 5 anni oppure, se più lunga, fa fede la durata di garanzia valida dalla data di acquisto di ciascun paese.
In caso di rivendicazioni, la data di acquisto deve essere dimostrata tramite una prova d'acquisto o una fattura.
2. La durata della garanzia non viene prolungata da riparazioni (dell'intero apparecchio o di parti di esso).
3. La garanzia non ha validità per i danni derivanti da
 - a. Uso improprio, ad es. mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
 - b. Riparazioni o modifiche effettuate dal cliente o da persone non autorizzate.
 - c. Trasporto dal produttore al cliente o durante il trasporto al centro di assistenza.
 - d. La garanzia non è valida per gli accessori soggetti a comune usura (manicotto, batterie, ecc.).
4. La responsabilità per danni diretti o indiretti causati dall'apparecchio è esclusa se viene riconosciuta una rivendicazione della garanzia per il danno dell'apparecchio.

Con riserva di errori e modifiche

NL Algemene aanwijzingen

- De maximale belasting is 180 kg (396 lb / 28 st), Verdeling van 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- **Reiniging:** de weegschaal kan met een bevochtigde, pluisvrije doek worden gereinigd. Dompel de weegschaal nooit in water. Spoel hem ook nooit af onder stromend water.
- Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vochtigheid, stof, chemische stoffen, sterke temperatuurschommelingen, elektromagnetische velden en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).
- Stap nooit op één zijde op de buitenste rand van de weegschaal: Kantelgevaar.
- Houd de verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen.
- Niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Mocht u nog vragen hebben over de toepassing van onze toestellen, neemt u contact op met uw handelaar of met de klantendienst van.
- Controleer voor iedere klacht de batterijen en vervang deze eventueel.
- Reparaties mogen alleen door de klantenservice of geautoriseerde handelaars worden uitgevoerd.

⚠️ Tips voor de omgang met batterijen

- Als vloeistof uit een batterijcel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.

- ⚠️ **Gevaar voor inslikken!** Kleine kinderen kunnen batterijen inslikken, met verstikking als gevolg. Bewaar batterijen daarom buiten het bereik van kleine kinderen!

- Neem de aanduiding van de polariteit (plus (+) en min (-) in acht.
- Als er een batterij is gaan lekken, moet u veiligheids-handschoenen aantrekken en het batterijvak met een droge doek reinigen.

- Bescherm de batterijen tegen overmatige hitte.
- ⚠️ Explosiegevaar!** Werp batterijen niet in vuur.
- Batterijen mogen niet worden opgeladen en niet worden kortgesloten.
 - Haal de batterijen uit het batterijvak als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
 - Gebruik alleen hetzelfde of een gelijkwaardig type batterij.
 - Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
 - Gebruik geen accu's!
 - Haal batterijen niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in kleine stukken.

⚠️ Verwijdering van batterijen

- Deponeer de gebruikte, volledig lege batterijen in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation van de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de batterijen correct te verwijderen.
- Deze tekens kunt u aantreffen op batterijen met schadelijke stoffen:
Pb = batterij bevat lood
Cd = batterij bevat cadmium
Hg = batterij bevat kwik.



⚠️ Algemene informatie over verwijdering

- Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil weggegooid worden. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



Verpakking overeenkomstig de milieu-eisen verwijderen.



Garantie / service

Neem in geval van garantieclaims contact op met het verkooppunt of de vestiging bij u in de buurt (zie de lijst "Service internationaal")

Voeg wanneer u het apparaat retourneert een kopie van de aankoopbon en een korte beschrijving van het defect bij de retourzending.

De volgende garantievooraarden zijn van toepassing:

1. De garantiertermijn voor producten van BEURER bedraagt 5 jaar of, indien langer, de in het betreffende land geldende garantiertermijn vanaf de aankoopdatum is doorslaggevend.
Bij een garantieclaim moet de aankoopdatum worden aangegeven door middel van een aankoopbon of een factuur.
2. Door reparaties (van het volledige apparaat of delen daarvan) wordt de garantiertermijn niet verlengd.
3. De garantie geldt niet voor beschadigingen als gevolg van
 - a. oneigenlijk gebruik, bijv. het niet in acht nemen van de gebruikersinstructies.
 - b. reparaties of wijzigingen die zijn uitgevoerd door de klant of onbevoegde personen.
 - c. het transport van de fabrikant naar de klant of tijdens het transport naar het servicecenter.
 - d. De garantie geldt niet voor toebehoren die onderhevig zijn aan gewone slijtage (manchet, batterijen enz.).
4. De verantwoordelijkheid voor door het apparaat veroorzaakte directe of indirekte gevolgschade is ook uitgesloten als bij beschadiging van het apparaat een garantieclaim wordt goedgekeurd.

Vergissingen en veranderingen voorbehouden

PT Indicações gerais

- A capacidade de carga máx. é de 180 kg (396 lb / 28 st), Divisão mínima: 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- **Limpeza:** pode limpar a balança com um pano húmido. Em caso algum, ponha a balança dentro de água e nunca a lave debaixo de água corrente.
- Proteja a balança contra embates, humidade, pó, produtos químicos, variações acentuadas de temperatura, campos electromagnéticos e fontes de calor demasiado próximo.
- Nunca coloque todo o seu peso sobre o rebordo exterior da balança: perigo de tombar!
- Mantenha as crianças afastadas do material de embalagem!
- Não se destina ao uso comercial.
- Se quiser colocar mais alguma questão em relação ao uso dos nossos equipamentos, contacte a loja onde comprou a balança ou o serviço de assistência a clientes da.
- Antes de reclamar, verifique se as baterias estão carregadas e substitua-as, se necessário.
- As reparações só poderão ser efectuadas pelo serviço de apoio ao cliente ou então por revendedores autorizados.

⚠️ Como lidar com as pilhas

- Se ocorrer um contacto do líquido da pilha com a pele ou os olhos, lave imediatamente as partes afetadas com água e consulte, o mais rapidamente possível, um médico.

- ⚠️ Risco de engolir!** As crianças pequenas podem engolir as pilhas accidentalmente e sufocar. Por isso, guarde as pilhas num local fora do alcance de crianças pequenas!
- Atenção à polaridade correta: positivo (+) e negativo (-).
 - No caso de uma pilha derramar o seu conteúdo, devem usar-se luvas de proteção para limpar o compartimento das pilhas com um pano seco.
 - Proteja as pilhas de calor excessivo.

⚠️ Perigo de explosão! Não deitar pilhas para o lume.


- As pilhas não podem ser carregadas nem curto-circuitadas.
- No caso de não usar o aparelho durante algum tempo, retire as pilhas do respetivo compartimento.
- Use unicamente o tipo de pilha idêntico ou equiparável.
- As pilhas devem ser sempre todas substituídas ao mesmo tempo.
- Não utilize baterias recarregáveis!
- Não desfaça, não abra nem triture as pilhas.

⚠️ Eliminação de pilhas

- Depois de gastas e completamente descarregadas, as pilhas terão de ser depositadas nos locais de recolha próprios (pilhões) ou entregues em lojas de material elétrico. Qualquer pessoa tem a obrigação de descartar as pilhas de forma adequada.
- Estes símbolos encontram-se em pilhas que contenham substâncias nocivas:
Pb = a pilha contém chumbo,
Cd = a pilha contém cádmio,
Hg = a pilha contém mercúrio.

⚠️ Eliminação genérica

- Por motivos ecológicos, quando estiver inutilizado, o aparelho não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A eliminação

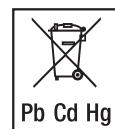

deverá ser feita através dos respetivos pontos de recolha existentes no seu país de residência. Elimine o aparelho de acordo com a diretiva REEE relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Se tiver qualquer dúvida a este respeito, informe-se junto do serviço municipal responsável pelo tratamento de resíduos.

Eliminar a embalagem de forma ecológica.



Garantia / Assistência

Para reivindicar quaisquer direitos à garantia legal, contacte o seu revendedor local ou a sucursal local (ver lista "Service international").

Ao devolver o aparelho, junte uma cópia do comprovativo de compra e uma breve descrição do defeito.

Aplicam-se os seguintes termos de garantia:

- O prazo de garantia para produtos da BEURER é de 5 anos ou - se for superior - aplicar-se-á o prazo e garantia válido no respetivo país, sempre a contar a partir da data de compra.
Para reivindicar um direito à prestação de um serviço ao abrigo da garantia é indispensável comprovar a data de compra através de um recibo ou uma fatura.
- Qualquer reparação efetuada (aparelho completo ou partes deles) não resulta na extensão do prazo de garantia.
- A garantia legal não se aplica a danos causados por a. tratamento incorreto, p. ex., desrespeito as instruções para o utilizador.
b. reparações ou modificações por parte do cliente ou terceiros não autorizados.
c. transporte do fabricante para o cliente ou durante o transporte para o centro de assistência.
d. A garantia legal não se aplica a acessórios sujeitos ao desgaste normal (braçadeira, pilhas, etc.).
- A responsabilidade por danos secundários, causados directa ou indirectamente, fica excluída, mesmo que seja admitido um direito à prestação ao abrigo da garantia por ter havido um dano.

Salvo erros e alterações

TR Genel açıklamalar

- Yükleme kapasitesi maks. 180 kg (396 lb / 28 st), Ölçeklendirme 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- Temizleme:** Teraziyi, tük birakmayan nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. Teraziyi hiç bir zaman suya sokmayın. Teraziyi asla akar suda yıkamayınız.
- Teraziyi darbelerden, nemden, tozdan, kimyasallardan, aşırı sıcaklık değişikliklerinden, elektromanyetik alanlardan ve çok yakın ışır kaynaklarından koruyun.
- Asla terazinin üzerine en diş kenarından çıkmayıñ: Devrilme tehlikesi!
- Çocukları ambalaj malzemelerinden uzak tutun!
- Ticari amaçlı kullanım için öngörlülmemiñtir.
- Aletlerimizin kullanımları hakkında başka sorularınız varsa, satıcınızza veya Müsteri Servisine başvurunuz.
- Her reklamasyon öncesiñde pilleri kontrol edin ve gerekiñse değiştirin.
- Tamir işlemlerini yalnızca müsteri servisi veya yetkili satıcılar tarafından yapılabilir.

⚠ Pillerle temas etme durumu için uyarılar

- Pil hücresindeki sıvı, cilt veya gözlerle temas ettiñde, ilgili yeri suyla yıkayın ve bir doktora başvurun.

⚠ Yutma tehlikesi! Küçük çocukların pilleri yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir. Bu nedenle pilleri, küçük çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayın!

- Artı (+) ve eks (-) kutup işaretlerine dikkat edin.
- Bir pil aktığında koruyucu eldiven giyin ve pil bölmesini kuru bir bezle temizleyin.
- Pilleri aşırı ısuya karşı koruyun.



Patlama tehlikesi! Pilleri ateleşle atmayın.

- Piller şarj edilmemeli veya kısa devre yaptırılmamalıdır.
- Cihazı uzun süre kullanmayıcaðınız durumlarda pilleri pil bölmesinden çıkarın.
- Yalnız aynı tip veya eşdeğer tip piller kullanın.
- Her zaman tüm pilleri aynı anda değiştirin.
- Şarj edilebilir pil kullanmayın!
- Pilleri parçalarına ayırmayın, açmayın veya parçalamayın.



Pillerin elden çıkarılması

- Kullanılmış, tamamen boşalmış piller özel işaretli toplama kutularına atılarak, özel atık toplama yerlerine veya elektrikli cihaz satıcılarına teslim edilerek bertaraf edilmelidir. Pilleri bertaraf edilmesi, yasal olarak sizin sorumluluðunuñuzdadır.
- Bu işaretler, zararlı madde içeren pillerin üzerinde bulunur:
Pb = Pil kurşun içeriyor,
Cd = Pil kadmiyum içeriyor,
Hg = Pil civa içeriyor.



⚠ Genel bertaraf

- Çevreyi korumak için, kullanım ömrü sona erdiñten sonra cihazı ev atıklarıyla birlikte elden çıkarmayın. Cihaz, ülkenizdeki uygun atık toplama yerlerinden bertaraf edilebilir. Cihazı hurda elektrikli ve elektronik eþya direktifine - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun olarak bertaraf edin. Bertaraf etme ile ilgili sorularınızı, ilgili yerel makamlara iletebilirsiniz.

Ambalajı çevreye saygılı şekilde bertaraf edin.



Garanti / Servis

Garanti ile ilgili talepleriniz için bölginizdeki yetkili satıcınız veya bölginizdeki şubeye başvurun („Uluslararası servis“ listesine bakın).

Cihazı geri gönderirken faturanızın bir kopyasını ve arızanın kisa açıklamasını ekleyin.

Aşağıdaki garanti koşulları geçerlidir:

- BEURER ürünlerinin garanti süresi 5 yıldır veya - daha uzun ise - ilgili ülkede geçerli olan satın alma tarihinden itibaren garanti süresi kabul edilir.
Garanti talebinde satın alma tarihi bir satış fişi veya fatura ile belgelenmelidir.
- Onarım (cihazın tamamı veya parçaları) garanti süresinin uzamasını sağlamaz.
- Garanti aşağıdaki sonucu oluñan hasarlar için geçerli değildir:
 - Usulüne uygun olmayan kullanım, örn. kullanım talimatlarına uyulmaması.
 - Müşteri veya yetkisiz kişiler tarafından yapılan onarımalar.
 - Üreticiden müsteriye nakliye veya servis merkezine nakliye sırasında oluşan hasarlar.
- Normal yipranmaya uğrayan aksesuarlar (manşet, piller vb.) için garanti geçerli değildir.
- Cihaz hasar görüldüğünde bir garanti talebi kabul edilmesi durumunda da cihazın neden olduğu doğrudan veya dolaylı netice kabilinden doğan hasarlar için sorumluluk üstlenilmez.

Hata, yanılma ve değişiklik yapma hakkımız saklıdır

EL Γενικές οδηγίες

- Η μέγ. αντοχή είναι 180 kg (396 lb / 28 st), Διαίρεση 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- **Καθαρισμός:** Μπορείτε να καθαρίσετε τη ζυγαριά με ένα υγρό, χωρίς χνούδια πανί. Μη βιθύσετε ποτέ τη ζυγαριά μέσα σε νερό ούτε να την πλύνετε ποτέ κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Προστατέψτε τη ζυγαριά από χυτήματα, υγρασία, σκόνη χημικές ουσίες, έντονη εναλλαγή θερμοκρασίας και κρατήστε τη μακριά από ηλεκτρομαγνητικά πεδία και πηγές θερμότητας.
- Σε καμία περίπτωση να μη στηρίζεστε στο εξωτερικό άκρο της ζυγαριάς μόνο από τη μια πλευρά: Κίνδυνος ανατροπής!
- Κρατήστε τη συσκευασία μακριά από τα παιδιά!
- Δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- Σε περίπτωση που έχετε τυχόν ερωτήσεις για τη χρήση των συσκευών μας, παρακαλείσθε ν' απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του Οίκου.
- Προτού προβείτε σε κάποια καταγγελία, ελέγχετε τις μπαταρίες και, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τις.
- Επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνον από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή από εξουσιοδοτημένους εμπόρους.

⚠ Υποδείξεις για τη χρήση των μπαταριών

- Εάν έλθει σε επαφή υγρό μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια, ξετίναντε αμέσως με άφθονο νερό τα σημεία που επιτήγησαν και συμβουλευθείτε αμέσως γιατρό.
- **⚠ Κίνδυνος κατάποση!** Μικρά παιδιά μπορεί να καταπούν μπαταρίες και να πνιγούν. Γι αυτό φυλάσσετε τις μπαταρίες σε μέρος μακριά από τα παιδιά!
- Προσέξτε τη σήμανση της πολικότητας στον (+) και μείον (-).
- Όταν μια μπαταρία έχει παρουσιάσει διαρροή, φορέστε προστατευτικά γάντια και καθαρίστε τη θήκη της με ένα στεγνό πανί.
- Προστατεύετε τις μπαταρίες από υπερβολική θερμότητα.
- **⚠ Κίνδυνος έκρηξης!** Μη ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να επαναφορτίζονται ή να βραχυκυκλώνονται.
- Αν σκοτείνετε να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη θήκη μπαταριών.
- Χρησιμοποιείτε μόνον τον ίδιο ή έναν ισοδύναμο τύπο μπαταριών.
- Αλλάζετε όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα.
- Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες!
- Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή τεμαχίζετε τις μπαταρίες.

⚠ Απόρριψη μπαταριών

- Οι μπαταρίες που έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν εκφορτιστεί πλήρως πρέπει να τοποθετούνται σε οικολογικούς κάδους, με ειδική σημανση ή στα σημεία συγκέντρωσης ειδικών απορριμάτων ή να παραδίνονται σε εμπόρους ηλεκτρικών ειδών. Είσαστε υποχρεωμένοι να την νομοθεσία να φροντίσετε για την απόρριψη των μπαταριών.
- Αυτά τα ούμβιολα βρίσκονται στις μπαταρίες που περιέχουν βλαβερές ουσίες:
Pb = η μπαταρία περιέχει μόλυβδο,
Cd = η μπαταρία περιέχει κάδμιο,



Hg = η μπαταρία περιέχει υδράργυρο.

⚠ Κοινός τρόπος απόρριψης

- Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, η συσκευή στο τέλος της διάρκειας ζωής της δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη μπορεί να πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων σημείων συλλογής στη χώρα σας. Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία της EK σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Σε περίπτωση απορίων, απευθυνθείτε στην αρμόδια για την απόρριψη δημοτική υπηρεσία.

Απορρίπτεται τη συσκευασία με οικολογικό τρόπο, σύμφωνο με το περιβάλλον.



Εγγύηση / Σέρβις

Σε περίπτωση αξιώσεων στα πλαίσια της εργοστασιακής εγγύησης, απευθυνθείτε στον τοπικό σας έμπορο ή στην τοπική αντιπροσωπεία (βλέπε λίστα „Σέρβις διεθνώς“). Επισυνάψτε με την επιστροφή της συσκευής ένα φωτοαντίγραφο της απόδειξης αγοράς μαζί με μία σύντομη περιγραφή της βλάβης. Ισχύουν οι ακόλουθοι όροι εργοστασιακής εγγύησης:

1. Ο χρόνος ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης για προϊόντα της BEURER είναι 5 χρόνια ή – αν είναι μεγαλύτερος – αυξάνεται σύμφωνα με τον χρόνο ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης, που ισχύει στην κάθε χώρα από την ημερομηνία αγοράς.
Σε περίπτωση αξιώσεων στα πλαίσια της εργοστασιακής εγγύησης, η ημερομηνία αγοράς πρέπει να αποδεικνύεται με την απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο.
2. Μετά την επισκευή (ολικές ή τμηματικές) της συσκευής δεν παρατείνεται η ισχύς της εργοστασιακής εγγύησης.
3. Η εργοστασιακή εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκύπτουν λόγω αντικανονικού χειρισμού, π. χ. εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης,
- β. επισκεύων από την πλευρά του πελάτη ή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,
- γ. μεταφοράς από τον κατασκευαστή στον πελάτη ή κατά τη μεταφορά στο κέντρο σέρβις.
- δ. Η εργοστασιακή εγγύηση δεν ισχύει για παρελκόμενα που υπόκεινται σε φυσική φθορά (μανσέτα, μπαταρίες κ.λπ.).

4. Αποκλείεται ιδίως κάθε ειδύνη για άμεσες ή έμμεσες επακόλουθες ζημιές, που προκαλούνται από τη συσκευή, όπως λόγω βλάβης της συσκευής αναγνωριστούν αξιώσεις στα πλαίσια της εργοστασιακής εγγύησης.

Με επιφύλαξη για σφάλματα και αλλαγές

DA Generelle anvisninger

- Bæreevnen er maks. 180 kg (396 lb / 28 st), Inddeling 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- **Rengøring:** Du kan rengøre vægten med en opvredet frugtfri klud. Vægten må ikke holdes under vand og må aldrig vaskes under rindende vand.
- Beskyt vægten mod stød, fugt, stov, kemikalier, stærke temperatursvingninger, elektromagnetiske felter og for nære varmekilder.
- Stå aldrig op på den yderste kant af den ene side på vægten: Vippefare!
- Hold børn på afstand af emballagematerialet!
- Ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
- Hvis de har yderligere spørgsmål vedr. brugen af vore vægte, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller til kundeservice.

- Kontrollér altid batterierne og udskift dem eventuelt inden en evt. reklamation.
- Reparationer må kun udføres af kundeservice eller autoriserede forhandlere.

Henvisning vedrørende batterier i apparatet

• Hvis væske fra cellebatteriet kommer i kontakt med hud eller øjne, skal det pågældende sted skyldes med vand, og der skal søges læge.

 **Slugningsrisiko!** Småbørn kan sluge batterier og blive kvalt. Batterierne skal derfor opbevares utilgængeligt for småbørn.

- Følg polaritetsmærkningerne for plus (+) og minus (-).
- Hvis der er løbet batterisyre ud af batteriet, skal du tage beskyttelseshandsker på og rense batterirummet med en tor klud.
- Beskyt batterier mod meget høj varme.

 **Eksplotionsfare!** Kast aldrig batterier ind i ild.

- Normale batterier må ikke oplades eller kortsluttes.
- Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud af batterirummet.
- Anvend kun de samme eller lignende batterier.
- Alle batterier skal altid udskiftes samtidigt.
- Der må ikke anvendes genopladelige batterier!
- Batterier må aldrig skilles ad, åbnes eller knuses.

Bortskaffelse af batterier

- De brugte og komplet afladede batterier skal bortskaffes via de specialkendtegenegne batteribeholdere, genbrugsplads/miljøbil eller via en elektroforhandler. Ifølge loven er elektroforhandlere forpligtet til at bortsække batterierne.
- Skadestofholdige batterier er mærket således:

Pb = Batteriet indeholder bly,
Cd = Batteriet indeholder kadmium,
Hg = Batteriet indeholder kviksolv.



Generel bortskaffelse

- Med henblik på at beskytte miljøet må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, når det skal kasseres. Bortskaffelse kan ske på det pågældende lokale indsamlingssted. Apparatet skal bortskaffes i henhold til EU-direktivet vedrørende elektronisk affald – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Henvend dig til din kommunes tekniske forvaltning, hvis du har andre spørgsmål. Emballagen skal bortskaffes på miljøvenlig vis.



Garanti / service

I tilfælde af krav i forbindelse med garantien bedes du henvende dig til din lokale forhandler eller det lokale kontor (se listen "International service").

Når du returnerer apparatet, skal du vedlægge en kopi af kvitteringen og en kort beskrivelse af defekten.

Følgende garantibestemmelser er gældende:

1. Garantien for produkter fra BEURER gælder i 5 år, eller – hvis den er længere – i henhold til den gældende garantiperiode i det pågældende land fra købsdatoen. I tilfælde af at der stilles krav inden for garantien, skal købsdatoen dokumenteres i form af en kvittering eller en faktura.
2. Garantiperioden bliver ikke forlænget i forbindelse med reparationer (af hele apparatet eller dele deraf).
3. Garantien dækker ikke skader, der skyldes

- a. forkert anvendelse, f.eks. manglende overholdelse af betjeningsvejledningen.
 - b. reparationer eller ændringer, som kunden eller ikke-autoriserede personer har udført.
 - c. transport fra producenten til kunden eller under transporten til servicecentret.
 - d. garantien gælder ikke for tilbehør, som nedslides ved normal brug (manchetter, batterier osv.).
4. Erstatningskrav for følgeskader, der direkte eller indirekte skyldes apparatet, udelukkes også, hvis garantien dækker en skade på apparatet.

Der tages forbehold for fejl og ænringar

SV Allmänna anvisningar

- Kapacitet max. 180 kg (396 lb / 28 st), Noggrannhet 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- **Rengöring:** Du kan rengöra vägen med en fuktad, ludd-fri trasa. Sänk aldrig ner vägen i vatten. Spola aldrig av den under rinnande vatten.
- Skydda vägen mot stötar, fukt, damm, kemikalier, kraftiga temperaturväxlingar, elektromagnetiska fält och alltför nära värmekällor.
- Trampa aldrig på den yttersta kanten på ena sidan av vägen: Risk att den tippar!
- Håll barn borta från förpackningsmaterialet!
- Ej avsedd för yrkesmässig användning.
- Skulle du ha ytterligare frågor om användningen av våra produkter, kontakta din återförsäljare eller kundservice.
- Testa alltid batterierna och byt vid behov ut dem före en eventuell reklamation.
- Reparationer får endast utföras av vår kundservice eller våra auktoriserade återförsäljare.

Anvisningar för hantering av batterier

- Om vätska från en battericell kommer i kontakt med hud eller ögon ska det berörda stället sköljas med rikliga mängder vatten. Uppsök läkare.

- **Risk för sväljning!** Små barn kan svälja batterier, vilket kan orsaka kvävning. Förvara därför batterier oåtkomligt för små barn!
- Lägg märke till polsymbolerna plus (+) och minus (-).
- Om ett batteri läcker ska batterifacket rengöras med en torr trasa. Skyddshandskar ska bäras vid rengöringen.
- Utsätt inte batterierna för höga temperaturer.

Risk för explosion! Kasta inte batterier i öppen eld.

- Batterier får inte laddas upp eller kortslutas.
- Om produkten inte ska användas under längre tid ska batterierna tas ut från batterifacket.
- Använd enbart samma eller en motsvarande batterityp.
- Byt ut alla batterier samtidigt.
- Använd inte uppladdningsbara batterier!
- Batterierna får inte öppnas eller tas isär.

Batteriaträvning

- De förbrukade, helt urladdade batterierna ska kasseras separat i speciellt märkta insamlingsbehållare eller lämnas tillbaka till affären. Batterier ska enligt lag kasseras på särskilt vis.
- Följande teckenkombinationer förekommer på batterier som innehåller skadliga ämnen:
Pb = batteriet innehåller bly
Cd = batteriet innehåller kadmium
Hg = batteriet innehåller kvicksilver.



Allmänt om avfallssortering

- När produkten har tjänat ut får den av hänsyn till miljön inte slängas bland det vanliga hushållsavfallet. Lämna den i stället till en återvinningscentral. Produkten ska avyttras i enlighet med EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE. Om du har frågor som rör avfallshantering kan du vända dig till ansvarig kommunal myndighet.

Avvallsortera förpakningen på ett miljövänligt sätt. 

Garanti/service

Kontakta din lokala återförsäljare eller filial om du har frågor inom ramen för garantin (se listan "Service International"). Bifoga en kopia av kvittot och en kort beskrivning av felet om du skickar tillbaka varan.

Det gäller följande garantivillkor:

- Garantitiden för produkter från BEURER är 5 år eller – om längre – är det den garantitid som gäller i respektive land som gäller från inköpsdatum. Vid ett garantianspråk måste inköpsdatum kunna styrkas med ett kvitto eller en faktura.
- Garantitiden förlängs inte vid reparationer (hela produkten eller delar av den).
- Garantin gäller inte skador som uppstår vid
 - Felaktig behandling, t.ex. om bruksanvisningen inte följs.
 - Reparationer eller ändringar som utförs av kunden eller obehörig person.
 - Transport från tillverkaren till kunden eller under transporten till servicecentret.
 - Garantin gäller inte tillbehör, som slits naturligt (manschetter, batterier etc.).
- Skadeståndskrav för följdskador som orsakats direkt eller indirekt av produkten utesluts också, även om skador på produkten som täcks av garantin uppstår.

Med reservation för fel och ändringar

NO Generelle merknader

- Vekten mäter opptil 180 kilo (396 lb / 28 st) i 50 grams (0,1 lb / 0,005 st) intervall.
- Rengöring:** Du kan rengjøre skalaen med en fuktig klut. Aldri dyp vekten i vann. Vekten skal heller aldri skylles under rennende vann.
- Beskytt vekten mot stöt, fuktighet, stov, kjemikaler, kraftige temperatursvingninger, elektromagnetiske felt og for nært plasserte varmekilder.
- Trå aldri ytterst på den ene siden av vekten: Vekten kan velte!
- Barn må holdes unna emballasjematerialet!
- Vekten er kun ment for personlig bruk, og er ikke tiltenkt for medisinsk eller yrkesmessig bruk!
- Hvis du har andre spørsmål angående bruken av et av våre produkter, kan du henvende deg til forhandleren din eller kundeservicen.
- Test/bytt ut batteriene før du foretar en reklamasjon.
- Reparasjoner skal kun utføres av kundeservice eller en autorisert forhandler.

Instruksjoner for bruk av batterier

- Hvis væske fra en battericelle kommer i kontakt med hud eller øyne, må det berørte området skylles med vann og lege oppsøkes umiddelbart.




Fare ved sveiling! Småbarn kan svele batteriene og kveles. Oppbevar derfor batteriene utilgjengelig for småbarn!

- Vær oppmerksom på polindikatorene pluss (+) og minus (-).
- Hvis et batteri lekker, må du bruke vernehansker og rengjøre batterirommet med en tørr klut.
- Beskytt batteriene mot for sterk varme.
- Eksplasjonsfare!** Ikke kast batterier på åpen ild.
- Batteriene må ikke lades opp eller kortsluttes.
- Ta batteriene ut av batterirommet hvis apparatet ikke skal brukes på en stund.
- Bruk bare den samme eller en tilsvarende batteritype.
- Skift alltid ut alle batteriene samtidig.
- Ikke bruk oppladbare batterier!
- Ikke demonter, åpne eller knus batterier.

Avhending av batterier

- De utbrukte, helt utladde batteriene må kasseres via spesielle godkjente samlebeholdere, mottatt for spesialavfall eller via den elektriske forretningen. Du er lovmessig forpliktet til å kaste batteriene på en miljømessig forsvarlig måte.
- Disse tegnene finnes på batterier som inneholder skadelige stoffer:
Pb = batteriet inneholder bly,
Cd = batteriet inneholder kadmium,
Hg = batteriet inneholder kvikksov.

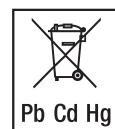

Generell avfallsbehandling

- Av hensyn til miljøet skal det kasserte apparatet ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Kassering skal skje via aktuelle oppsamlingspunkter. Apparatet skal avhendes i henhold til WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ved spørsmål må du henvende deg til ansvarlige kommunale myndigheter.



Avhend emballasjen miljørtig. 

Garanti/service

I forbindelse med garantikrav må du henvende deg til forhandleren eller det lokale datterselskapet (se listen „Service international“).

Ved retursendning av apparatet må du legge ved en kopi av kjøpskvitteringen og en kort beskrivelse av defekten.

Følgende garantibetingelser gjelder:

- Garantien for produkter fra BEURER er 5 år – eller lengre, og i sistnevnte tilfelle er gjeldende nasjonale garanti fra kjøpsdato avgjørende.
Ved et forsikringskrav må kjøpsdatoen dokumenteres med en kjøpskvittering eller en faktura.
- Garantien forlenges ikke ved reparasjoner (fullstendig apparat eller deler av dette).
- Garantien gjelder ikke for skader som oppstår ved
 - Ikke-forskriftsmessig bruk, for eksempel manglende overholdelse av bruksanvisningen.
 - Reparasjoner eller forandringer utført av kunden eller uautoriserte personer.
 - Transport fra produsenten til kunden eller under transport til servicesenteret.
 - Forsikringen gjelder ikke for tilbehør som er utsatt for vanlig slitasje (mansjet, batterier osv.).
- Ansvar for direkte eller indirekte følgeskader på grunn av apparatet er derfor utelukket, også når skaden på apparatet godkjennes som garantikrav.

Med forbehold om evt. feil og endringer

FI Yleisiä ohjeita

- Kantavuus enintään 180 kg (396 lb / 28 st), Näytöväli 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- Puhdistus:** Voit puhdistaa vaa'an kostutetulla, nukkamattomalla liinalla. Älä koskaan upota vaakaa veteen. Älä koskaan huuhtele vaakaa juoksevan veden alla.
- Suojaa vaaka iskuilta, kosteudelta, pölyltä, kemikaaleilta, voimakkailta lämpötilanvaihteluilta, elektromagneettisilta kentiltä ja suorilta lämmönlähteiltä.
- Seiso aina keskellä vaakaa, älä vain toisella reunalla: kaatumisvaara!
- Älä jätä pakkausmateriaalia lasten ulottuville!
- Laite on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön.
- Jos haluatte kysyä lisää laitteemme soveltamisesta, käänny myyjän tai asiakaspalvelun puoleen.
- Ennen reklamaation tekemistä tarkista ensin paristot ja valhda ne tarvittaessa.
- Korjauskaa saa tehdä vain asiakaspalvelu tai valtuutettu myyjä.

⚠ Paristojen käsittelyyn liittyvät ohjeet

- Jos paristosta vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai silmien kanssa, huuhtele altistunut kohta vedellä ja hakeudu lääkärin.

⚠ Tukehtumisvaara! Pieni lapsi saattaa nielaista pariston ja tukehtua. Säilytä siksi paristot pienestä lasten ulottumattomissa!

- Tarkista napaisuusmerkinnät plus (+) ja miinus (-).
- Jos paristosta on vuotanut nestettä, käytä suojakäsinteitä ja puhdista paristokoteloa kuivalla liinalla.
- Älä altista paristoa liialliselle lämmölle.

⚠ Räjähdyssvaara! Paristoja ei saa heittää tuleen.

- Paristoja ei saa ladata tai kytkeä oikosulkuihin.
- Poista paristot paristokotelosta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaa.
- Käytä aina samanlaisia tai samantyyppisiä paristoja.
- Vaihda kaikki paristot aina samanaikaisesti.
- Älä käytä ladattavia paristoja!
- Paristoja ei saa purkaa, avata tai rikkota.

⚠ Paristojen hävittäminen

- Hävitä käytetyt, täysin tyhjät paristot viemällä ne paikalliseen paristonkeräys- tai ongelmajätepisteeseen tai toimittamalla ne elektroniikkaliikkeeseen hävitettäväksi. Laki edellyttää, että paristot hävitettään asianmukaisella tavalla.
- Ympäristölle haitallisissa paristoissa on seuraavia merkintöjä:
Pb = paristo sisältää liijyä,
Cd = paristo sisältää kadmiumia,
Hg = paristo sisältää elohopeaa.



⚠ Laitteen hävittäminen

- Kun laitteen käyttöikä on päättynyt, laitetta ei saa ympäristösyistä hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Hävitä käytöstä poistettu laite viemällä se asianmukaiseen keräys- ja kierrätyspisteesseen. Laite tulee hävittää EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkakaroma koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti. Saat lisätietoja paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.

Hävitä pakaus ympäristöä säästääen.

Takuu/huolto

Ota takuuta koskevissa vaatimuksissa yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai toimipisteesseen (katso luettelo Service international).

Liitä laitteen palautuslähetykseen kopio ostotositteesta sekä lyhyt kuvaus laitteen viasta.

Noudatamme seuraavia takuuuehtoja:

- BEURER-tuotteiden takuuaikea on voimassa ostopäivästä lukien 5 vuotta. Takuuajan ollessa pidempি se vastaa kussakin maassa voimassa olevaa takuuaikaa. Takuuvaatimuksen yhteydessä ostopäivä on osoitettava ostotositteella tai laskulla.
- Korjaukset (laite kokonaisuudessaan tai laitteen osat) eivät pidennä takuuaikaa.
- Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet a. epäasianmukaisesta käytöstä (esim. käyttööhjeen noudattamatta jättämisenstä)
b. asiaikkaan tai välttymättä miettillä henkilön tekemistä korjauskisista tai muutoksista
c. kuljetettaessa tuotetta valmistajalta asiakkaalle tai huoltopisteeseen.
d. Takuu ei kata lisäosia, jotka ovat alittia yleiselle kulumiselle (mansetit, paristot jne.).
- Vastuu laitteen aiheuttamista suorista tai epäsuorista välillistä vahingoista päätyy myös silloin, kun vahingoittunutta laitetta koskeva takuuvaatimus on hyväksytty.

Virheet ja muutokset mahdollisia.

RU Общие указания

- Максимальная нагрузка составляет 180 кг (396 lb / 28 st). Цена деления 50 г (0,1 lb / 0,005 st).
- Чистка:** Для очистки весов используйте влажную безворсовую салфетку. Не окуinate весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой.
- Весы следует предохранять от ударов, влажности, пыли, химикатов, сильных колебаний температуры, электромагнитных полей и не устанавливать их вблизи источников тепла.
- Никогда не вставайте на один край весов: опасность опрокидывания!
- Не давайте упаковочный материал детям!
- Не предназначены для коммерческого использования.
- Если у Вас имеются вопросы об использовании нашего прибора, обращайтесь, пожалуйста, к Вашему продавцу или в сервисную службу.
- Перед заявлением претензий проверьте и при необходимости замените батареи.
- Ремонт должен производиться только сервисной службой или авторизованными торговыми представителями.

⚠ Обращение с элементами питания

- При попадании жидкости из аккумулятора на кожу или в глаза необходимо промыть соответствующий участок большим количеством воды и обратиться к врачу.

⚠ Опасность проглатывания мелких частей!

Маленькие дети могут проглотить батарейки и подаваться ими. Поэтому батарейки необходимо хранить в недоступном для детей месте!

- Обращайте внимание на обозначение полярности: плюс (+) и минус (-).
- Если батарейка потекла, очистите отделение для батареек сухой салфеткой, надев защитные перчатки.
- Защищайте батарейки от чрезмерного воздействия тепла.



- ⚠️ Опасность взрыва!** Не бросайте батарейки в огонь.
- Не заряжайте и не замыкайте батарейки накоротко.
 - Если прибор длительное время не используется, извлеките из него батарейки.
 - Используйте батарейки только одного типа или равнозначенных типов.
 - Заменяйте все батарейки сразу.
 - Не используйте перезаряжаемые аккумуляторы!
 - Не разбирайте, не открывайте и не разбивайте батарейки.

⚠️ Утилизация батареек

- Выбрасывайте использованные, полностью разряженные батарейки в специальные контейнеры, сдавайте в пункты приема сплощих или в магазины электрооборудования. Закон обязывает пользователей обеспечить утилизацию батареек.
- Следующие знаки предупреждают о наличии в батарейках токсичных веществ:

Pb = свинец,
Cd = кадмий,
Hg = ртуть.



⚠️ Общая утилизация

- В интересах защиты окружающей среды по окончании срока службы следует утилизировать прибор отдельно от бытового мусора. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора в Вашей стране. Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС по отходам электрического и электронного оборудования – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). В случае вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

Утилизировать упаковку в соответствии с предписаниями по охране окружающей среды.



20
PAP

Гарантия/сервисное обслуживание

Более подробная информация по гарантии/сервису находится в гарантийном/сервисном талоне, который входит в комплект поставки.

Возможны ошибки и изменения

PL Ważne wskazówki

- Maksymalne obciążenie wynosi 180 kg (396 lb / 28 st). Dokładność 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- **Czyszczenie:** do czyszczenia wagi należy używać lekko wilgotnej, nie pozostawiającej włókien szmatki. Niemniej nie wolno zanurzać wagi w wodzie.
- Wagę należy chronić przed wstrząsami, wilgotnością, kurzem, chemicznymi, dużymi wahaniem temperatury oraz polami elektromagnetycznymi. Urządzenie nie powinno znajdować się zbyt blisko źródeł ciepła.
- Nie wolno stawać z jednej strony na krawędzi wagi – waga może się przechylić!
- Opakowanie należy trzymać z dala od dzieci!
- Waga nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego.
- W przypadku dalszych pytań dotyczących stosowania naszych urządzeń prosimy o zwrócenie się do sprzedawcy lub działu obsługi klienta firmy.
- Przed złożeniem reklamacji należy zawsze sprawdzić baterie i w razie potrzeby je wymienić.

- Napравы mogą być przeprowadzane tylko przez serwis producenta lub autoryzowanego dystrybutora.

⚠️ Wskazówki dotyczące postępowania z bateriami

- Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy przemyć dane miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.
- ⚠️ **Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia!** Małe dzieci mogąły połknąć baterie i się nimi udusić. Dlatego baterie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Należy zwrócić uwagę na znak polaryzacji plus (+) i minus (-).
- Jeśli z baterii wyciekł elektrolit, należy założyć ręka-wice ochronne i wyczyścić przegrodę na baterie suchą szmatką.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym działaniem wysokiej temperatury.

⚠️ Zagrożenie wybuchem!

- Nie wolno ładować ani zwierać baterii.
- W przypadku niekorzystania z urządzenia przez dłuższy czas wyjąć baterie z przegrody.
- Należy używać tylko tego samego lub równoważnego typu baterii.
- Zawsze należy wymieniać jednocześnie wszystkie baterie.
- Nie należy używać akumulatorów!
- Nie wolno rozmontowywać, otwierać ani rozdrabniać baterii.

⚠️ Utylizacja baterii

- Zużyte, całkowicie rozładowane baterie należy wyrzucać do oznakowanych specjalnie pojemników zbiorczych, przekazywać do punktów zbiórki odpadów specjalnych lub do sklepu ze sprzętem elektrycznym. Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji baterii zgodnie z przepisami.
- Na bateriach zawierających szkodliwe związki znajdują się następujące ozna-czenia:

Pb = bateria zawiera ołówk,
Cd = bateria zawiera kadm,
Hg = bateria zawiera rtęć.



⚠️ Ogólna utylizacja

- Ze względu na ochronę środowiska po zakończeniu użytkowania urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Utylizację należy zlecić w odpowiednim punkcie zbiórki w danym kraju. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W razie pytań należy zwrócić się do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za utylizację.

Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.



20
PAP

Gwarancja/serwis

W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się do miejscowego dystrybutora lub partnera (patrz lista „Service international”).

Przy odsyłaniu urządzenia należy załączyć kopię dowodu zakupu i krótki opis usterki.

Obowiązują następujące warunki gwarancji:

1. Okres gwarancji na produkty firmy BEURER wynosi 5 lat lub, jeśli jest dłuższy, obowiązuje w danym kraju od daty zakupu. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji konieczne jest potwierdzenie daty zakupu przez okazanie dowodu zakupu lub faktury.

- 2. Napravy (całego urządzenia lub jego części) nie przedłużają okresu gwarancyjnego.
- 3. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń powstałych w następujących okolicznościach:
a. Z powodu niewłaściwego użytkowania, np. nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
b. W wyniku napraw lub modyfikacji wykonanych przez klienta lub osoby nieupoważnione.
c. Podczas transportu od producenta do klienta lub podczas transportu do Servicecenter.
d. Ponadto nie obejmuje akcesoriów dostarczonych z urządzeniem, które ulegają regularnemu zużyciu.
- 4. Odpowiedzialność za szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez urządzenie jest wykluczona także wtedy, gdy w przypadku jego uszkodzenia uznane zostanie roszczenie z tytułu gwarancji.

Zastrzega się możliwość zmian lub pomyłki

CS Obecné pokyny

- Zatížitelnost je max. 180 kg (396 lb / 28 st), Dělení 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- **Čistění:** Váhu můžete čistit navlhčenou utěrkou nepouštějící vlákna. Nikdy neponořujte váhy do vody. Nikdy je také neoplavujte pod teckoucí vodou.
- Váhu chráťte před nárazy, vlnkostí, prachem, chemikálemi, silnými tepločinnými výkyvy, elektromagnetickými poli a blízkými tepelnými zdroji.
- Nestoupejte z jedné strany na samy okraj váhy: nebezpečí převrhnutí!
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí!
- Není určeno pro komerční použití.
- Pokud budete mít další dotazy k používání našich přístrojů, obrátěte sa prosím na Vašeho prodejce nebo na zákaznický servis.
- Před každou reklamací nejdříve zkонтrolujte baterie a případně je vyměňte.
- Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy nebo autorizovaní obchodníci.

⚠ Pokyny pro zacházení s bateriami

- Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.

⚠ Nebezpečí spolknutí! Malé děti by mohly baterie spolknout a udusit se. Baterie proto uchovávejte mimo dosah dětí!

- Dbejte na označení polarity plus (+) a minus (-).
- Pokud baterie vytče, použijte ochranné rukavice a vycistěte příhrádku na baterie suchou utěrkou.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem.

⚠ Nebezpečí výbuchu! Baterie nevhazujte do ohně. • Baterie nesmí být nabijeny nebo zkratovány. • V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vyměňte baterie z příhrádky. • Používejte stejný nebo rovnocenný typ baterii. • Vyměňujte vždy všechny baterie zároveň. • Nepoužívejte dobíjecí akumulátory! • Baterie se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.

⚠ Likvidace baterií

- Použité, zcela vybité baterie se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrných pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.

- Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nachází následující značky:
Pb = baterie obsahuje olovo,
Cd = baterie obsahuje kadmium,
Hg = baterie obsahuje rtuť.


⚠ Obecná likvidace

- V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

Obal zlikvidujte ekologicky.



PAP

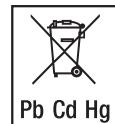

Pb Cd Hg



Žáruka / servis

Při uplatňování nároků z odpovědnosti za vadu se obraťte na místního prodejce nebo místní pobočku (viz seznam „Service international“).

Při zaslání přístroje přiložte kopii dokladu o kupi a stručný popis závady.

Platí tyto záruční podmínky:

1. Záruční doba produktu BEURER činí 5 let nebo – pokud je delší – rozhodující je záruční doba od data nákupu platná v příslušné zemi.

Při uplatňování nároku z odpovědnosti za vadu je nutné doložit datum nákupu dokladem o kupi nebo faktuру.

2. Opravu (celého přístroje nebo jeho části) se záruční lhůta neprodlužuje.

3. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku

a. neodborné manipulace, např. při nedodržení uživatelských pokynů.

b. oprav nebo změn ze strany zákazníka nebo neoprávněných osob.

c. přepravy od výrobce k zákazníkovi nebo během přepravy do servisního střediska.

d. Záruka se nevztahuje na příslušenství, které podléhá běžnému opotřebení (manžeta, baterie atd.).

4. Odovědnost za následné přímé nebo nepřímé škody způsobené přístrojem je vyloučena v případě, že byly při poškození uznány nároky z odpovědnosti za vadu.

Chyby a změny vyhrazeny

SL Splošni napotki

- Maksimalna obremenitev znaša 180 kg (396 lb / 28 st), Razdelitev 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- **Čiščenje:** Tehnico lahko očistite z navlaženo krpo, ki ne pušča vlaken. Nikoli ne potapljujte tehnicne v vodo. Nikoli je ne perite pod tekočo vodo.
- Zaščitite tehnicno pred udarci, vlago, prahom, kemikalijami, velikimi temperaturnimi nihanji, elektromagnetnimi polji in v bližini se nahajajočih virov toplove.
- Nikdar ne stopite enostransko na zunanj rok tehnicne: lahko se prekucnete!
- Ne dovolute stika otrok s pakirnim materialom!
- Ni za gospodarske namene.
- Če imate kakšna vprašanja glede uporabe naše naprave, se prosimo obrnite na našega zastopnika ali na servisno službo družbe.
- Pred vsako reklamacijo najprej preverite baterijske vložke, in jih po potrebi zamenjajte.
- Popravila se smejo opravljati le v servisni službi ali pri pooblaščenih trgovcih.

Napotki za ravnanje z baterijami

- Če tekočina iz baterijske celice pride v stik s kožo ali očmi, prizadeta mesta sperite z vodo in obiščite zdravnika.
- ⚠️ Nevarnost zadušitve!** Majhni otroci lahko pogoltnejo baterije in se zaradi tega zadušijo. Zato baterije hranite na mestu, kjer jih majhni otroci ne morejo dosegel.
- Bodite pozorni na znak polarnosti plus (+) in minus (-).
- Ob razlitju baterije si nadenite zaščitne rokavice in predalček za baterije očistite s suho krpo.
- Baterije zaščitite pred previsoko temperaturo.

- ⚠️ Nevarnost eksplozije!** Baterij ne mečite v ogenj.
- Baterij ne smete polniti ali na njih povzročati kratkega stika.
 - Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije iz predalčka.
 - Uporabite le enake baterije ali baterije enakovrednega tipa.

Odstranitev baterij

- Uporabljene in povsem prazne baterije morate odložiti v posebej označene zbiralnike, na zbirna mesta za nevarne odpadke ali pri trgovcu z elektronskimi in električnimi izdelki. Zakonsko ste zavezani k pravilnemu odstranjevanju baterij.
- Na baterijah, ki vsebujejo škodljive snovi, so naslednje oznake:
Pb = baterija vsebuje svinec,
Cd = baterija vsebuje kadmij,
Hg = baterija vsebuje živo srebro.



Pb Cd Hg

Splošno odstranjevanje

- Ko naprava ni več uporabna, je zaradi varovanja okolja na smete zavreči med gospodinjske odpadke. Odstranite jo na ustreznih zbirališčih za predelavo odpadkov v svoji državi. Napravo odstranite v skladu z Direktivo ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na pristojno komunalno podjetje.

Embalažo odstranite na okolju prijazen način.



Garancija / servis

Za garancijske zahteve se obrnite na lokalnega prodajalca ali lokalno pisarno (glejte »Mednarodni seznam servisov«).

Ob vračilu naprave priložite kopijo potrdila o nakupu in kratek opis napake.

Veljavjo naslednji garancijski pogoji:

1. Garancijski rok za izdelke podjetja BEURER je 5 let ali, če je daje, veljavno garancijsko obdobje od datuma nakupa. Za garancijsko zahtevo je treba datum nakupa dokazati z dokazilom o nakupu ali računom.
2. Popravila (celotne naprave ali njenih posameznih delov) ne podajajo garancijskega roka.
3. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi
 - a. nepravilne uporabe, npr. neupoštevanja navodil za uporabo.
 - b. popravil ali sprememb s strani kupca ali nepooblaščenih oseb.
 - c. prevoza od proizvajalca do kupca ali med prevozom do servisnega centra.
 - d. Garancija ne velja za dodatke, ki so predmet normalne obrabe (manšete, baterije itd.).
4. Izključena je odgovornost za neposredno ali posredno posledično škodo, ki jo povzroči naprava, tudi če se z garancijsko zahtevo dokaže, da je naprava poškodovana.

Pridržujemo si pravico do napak in sprememb

HU Általános utasítások

- Terhelhetőség max. 180 kg (396 lb / 28 st), Dokładność 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- **Tisztítás:** A mérleget egy megnedvesített, nem bolyhosztó kendővel tisztíthatja meg. A mérleget sose merítse vízbe, és sose öblítse le folyó vizet alatt!
- Óvja a mérleget az ütődéséktől, a nedvességtől, a portól, a vegyszerekkel, az erős hőmérséklet-ingadozástól, az elektromágneses mezőktől és a túl közelű hőforrásoktól.
- Soha ne álljon a mérleg egyik külső peremére: borulásveszély!
- A csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol!
- Nem üzleti célú alkalmazásra készült.
- Amennyiben készülékeink használatával kapcsolatban kérdesei merülnek fel, kérjük, forduljon kereskedőjéhez vagy a ügyfélszolgálati irodájához.
- minden reklámáció előtt ellenőrizze az elemeket, és szükség esetén cserélje ki őket.
- A javítást csak szakszerviz vagy arra felhatalmazott kereskedő végezheti.

Az elemekkel kapcsolatos figyelmeztetések

- Ha valamelyik elemcella folyadába a bőrre vagy a szembe jut, az érintett területet öblítse le vízzel és forraljon orvoshoz.

- ⚠️ Fennáll a lenyelés veszélye!** A kisgyermekek az elemeket lenyelhetik és azok fulladást okozhatnak. Ezért tartsa az elemeket kisgyermekektől elzárt helyen!
- Ügyeljen a pozitív (+) és negatív (-) polaritásra.
- Ha valamelyik elem kifolyt, akkor húzzon védőkesztyűt, majd száraz ruhával alaposan tisztítsa meg az elemtártó rekeszét.
- Védje az elemeket a túlzott hőtől.

- ⚠️ Robbanásveszély!** Ne dobja az elemeket tűzbe.
- Az elemet nem szabad utántölteni, vagy rövidre zárni.
 - Ha hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket az elemtártó rekeszből.
 - Csak ugyanazt vagy egyenértékű elemtípusat használjon.
 - Az elemeket minden egyidejűleg cserélje ki.
 - Ne használjon akkumulátorokat!
 - Az elemeket nem szabad szétszedni, kinyitni vagy feldarabolni.

Elelem ártalmatlanítása

- Az elhasznált, teljesen lemerült elemeket a külön megjelölt gyűjtőtartályokba helyezze, gyűjtőhelyeken vagy az elektromos boltokba leadva ártalmatlanításra. Az elemek ártalmatlanítására törvény kötelezi.
- A káros anyagot tartalmazó elemeken a következő jelölések szerepelnek:
Pb = az elem ólomtartalmaz,
Cd = az elem kadmiumot tartalmaz,
Hg = az elem higanyt tartalmaz.



Pb Cd Hg

Általános ártalmatlanítás

- A környezet védelme érdekében a készüléket az élettartama után nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Az ártalmatlanítást az Ön országának megfelelő gyűjtőhelyein kell elvégezni. A készüléket az Európai Uniónak az elhasználódott elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelvre szerint ártalmatlanításra. Esetleges további kérdé-



seivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.

A csomagolást környezettudatosan ártalmatlanítja.



Garancia / szerviz

Szavatosság tekintetében forduljon kereskedőjéhez vagy helyi képviseletéhez (lásd a „Service international” listát). A készülék visszaküldése esetén csatoljon egy másolatot a vásárlást igazoló nyugatról, és a hiba rövid leírását.

A következő garanciális feltételek érvényesek:

1. A BEURER termékekre vonatkozó jótállási időtartam 5 év, vagy – amennyiben hosszabb – a mindenkor helyi szavatossági időtartam a vásárlás napjától kezdődően.
2. Szavatossági igény esetén a vásárlás dátumát nyugta vagy számlá útján kell igazolni.
3. Javitások esetén (a készülék egészére vagy annak részeire vonatkozóan) a jótállási időtartam nem hosszabbodik meg.
4. A jótállás nem vonatkozik a következőkből eredő károkra:
 - a szakszerűlen kezelés, pl. a használati utasítás figyelmen kívül hagyása.
 - az ügyfél vagy nem jogosult személy által végrehajtott javítások vagy módosítások.
 - c. a gyártótól az ügyfél felé vagy az ügyfélétől a Servicecenter történő szállítás során bekövetkező károk.
 - d. A jótállás nem vonatkozik tartozékokra, amelyek tartós használatnak vannak kitéve (mandzsetták, elemek stb.).
5. A készülék meghibásodásából eredő károkért való felelősséggel akkor is kizárt, ha maga a jótállási igény helytálló.

Tévedések és váltóztatások jogá fenntartva

RO Indicații generale

- Sarcina admisă a căntarului este de maxim 180 kg (396 lb / 28 st), divizare 50 g (0,1 lb / 0,005 st).
- **Curătarea:** Căntarul poate fi curătat cu o cărpă umezită, fără scame. Nu scufundăți niciodată căntarul în apă. Nu spălați niciodată căntarul sub jet de apă.
- Feriți căntarul de șocuri, umiditate, praf, substanțe chimice, fluctuații puternice de temperatură, câmpuri electromagnetice și surse de căldură prea apropiate.
- Nu vă urcați niciodată pe căntar pe marginea exteroară a căntarului: Pericol de cădere!
- Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor!
- Aparatul este indicat pentru uz propriu și nu pentru uz medical sau comercial!
- În cazul în care aveți întrebări cu privire la utilizarea aparatelor noastre, vă rugăm să vă adresați comerciantului sau serviciului pentru clienti.
- Înainte de a înainta o reclamație, verificați funcționarea bateriilor și înlocuiți-le dacă este nevoie.
- Reparațiile trebuie efectuate doar de personalul serviciului pentru clienti sau de comercianții autorizați.

⚠️ Indicații privind manipularea bateriilor

- Când lichidul din celula bateriei intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locurile afectate cu apă și căutați ajutor de specialitate.
- **⚠️ Pericol de înghițire!** Copiii pot înghiții bateriile și se pot astixia. De aceea, nu păstrați bateriile la îndemâna copiilor!
- Respectați marcajele de polaritate Plus (+) și Minus (-)
- Dacă una dintre baterii s-a scurs, puneti-vă mănuși de protecție și curătați compartimentul pentru baterii cu o cărpă uscată.
- Protejați bateriile de căldura excesivă.

• **⚠️ Pericol de explozie!** Nu aruncați nicio baterie în foc.

- Bateriile nu trebuie să fie încărcate sau scurtcircuite.
- În cazul în care aparatul nu este utilizat o perioadă îndelungată, scoateți bateriile din compartimentul pentru baterii.
- Utilizați numai același tip de baterie sau un tip de baterie cu aceeași valoare.
- Înlăturați întotdeauna toate bateriile simultan.
- Nu utilizați acumulatoare!
- Nu dezasamblați, deschideți sau rupeți bateriile.

⚠️ Eliminarea ca deșeu a bateriei

- Bateriile uzate, complet goale trebuie eliminate în recipientele de colectare special marcate, la firmele specializate sau la comerciantul de electrice. Aveți obligația legală să eliminați bateriile ca deșeu.
- Bateriile care conțin substanțe toxice prezintă aceste simboluri:
Pb = bateria conține plumb,
Cd = bateria conține cadmiu,
Hg = bateria conține mercur.



⚠️ Eliminarea generală ca deșeu

- În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoiul menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.



Eliminați ambalajul în mod ecologic.

Garanție / Service

În cazul obligațiilor de garanție, adresați-vă comerciantului local sau reprezentanței locale (a se vedea lista "Service internațional").

La returnarea produsului, anexați o copie a bonului fiscal și o scurtă descriere a defectiunii.

Sunt valabile următoarele condiții de acordare a garanției:

1. Termenul de garanție pentru produsele BEURER este de 5 ani sau, în cazul în care este mai mare, este aplicabil termenul de garanție valabil de la data achiziționării din țara respectivă.
În cazul unei obligații de garanție, data achiziționării trebuie dovedită prin intermediul unui bon fiscal sau al unei facturi.
2. Efectuarea reparatiilor (la nivelul întregului produs sau al pieselor) nu duce la prelungirea termenului de garanție.
3. Garanția nu este valabilă în cazul defectiunilor cauzate de a. utilizarea necorespunzătoare, de exemplu, nerescpectarea instrucțiunilor de utilizare.
b. reparării sau modificării efectuate de către client sau de către o persoană neautorizată.
c. transportul de la producător la client sau în timpul transportului către centrul de service.
d. Garanția nu este valabilă pentru accesorii care sunt supuse uzurii în mod obișnuit (manșetă, baterii etc.).
4. Este exclusă răspunderea pentru daunele directe sau indirekte cauzate de produs și în situația în care este recunoscută o obligație de garanție în asociere cu defectarea produsului.

Ne rezervăm drepturile asupra erorilor și modificărilor

SK Všeobecné upozornenia

- Zatáčenie predstavuje max. 180 kg (396 lb /28 st), hodnota dielika 50 g (0,1 lb /0,005 st).
- Cistenie:** Váhu môžete čistiť navlhčenou utierkou nepúšťajúcou vlákna. Váhu nikdy neponárajte do vody. Nikdy ju neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Váhu chráňte pred nárazmi, vlhkostou, prachom, chemikáliami, veľkými teplotnými výkyvmi, pôsobením elektromagnetických polí a neskladujte ju blízko tepelných zdrojov.
- Nikdy nestúpajte iba na jednu vonkajšiu stranu váhy: Nebezpečenstvo prevrátenia!
- Obal uchovávajte mimo dosahu detí!
- Nie je určená na komerčné využitie.
- V prípade otázok týkajúcich sa použitia našich prístrojov sa obráťte na svojho predajcu alebo na zákaznícky servis.
- Pred každou reklamáciou najskôr skontrolujte batérie a v prípade potreby ich vymenite.
- Opravy smie vykonávať len zákaznícky servis alebo autorizovaní predajcovia.

⚠️ Upozornenia týkajúce sa manipulácie s batériami

- Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z článku batérie s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto vymyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

⚠️ Nebezpečenstvo prehltnutia! Malé deti by mohli batérie prehltnúť a zadusiť sa nimi. Z tohto dôvodu skladujte batérie mimo dosahu malých detí!

- Dabajte na označenie polarity plus (+) a minus (-).
- Ked' batéria vyečíte, nasadte si ochranné rukavice a prieberadky na batérie vycistite suchou handričkou.
- Batérie chráňte pred nadmerným teplom.

⚠️ Nebezpečenstvo výbuchu! Batérie nikdy nehádzte do ohňa.

- Batérie sa nesmú nabíjať alebo skratovať.
- Ked' prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie z prieberadky na batérie.
- Používajte iba rovnaký alebo rovnocenný typ batérií.
- Batérie vždy vymieňajte naraz.
- Nepoužívajte nabijateľné akumulátory!
- Batérie nerozoberajte, neotvárajte ani neštiepte.

⚠️ Likvidácia batérií

Použité úplne vybité batérie musíte likvidovať vložením do špeciálne označených zbernych nádob, odovzdáním na zbernych miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona máte povinnosť batérie likvidovať.

- Na batériach obsahujúcich škodlivé látky nájdete tiež značky:

Pb = batéria obsahuje olovo,
Cd = batéria obsahuje kadmiump
Hg = batéria obsahuje ortuť



⚠️ Všeobecná likvidácia

- V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení jeho životnosti nesmie zahodiť do domového odpadu. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom vhodných zbernych miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic

Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.



Obal ekologicky zlikvidujte.

Platia nasledujúce záručné podmienky:

- Záručná doba pre výrobky BEURER je 5 rokov alebo – ak je dlhšia – je rozhodujúca záručná doba od dátumu kúpy platná v príslušnej krajinе.
V prípade nároku na záruku sa musí preukázať dátum kúpy pomocou pokladničného dokladu alebo faktúry.
- Opravami (celého prístroja alebo jeho časti) sa záručná doba nepredĺžuje.
- Záruka sa netýka poškodení v dôsledku a. nesprávnej manipulácie, napr. v dôsledku nedodržania pokynov na používanie; b. oprav alebo zmien zo strany zákazníka alebo nepovolaných osôb; c. prepravy od výrobcu k zákazníkovi alebo počas prepravy do servisného strediska; d. záruka neplatí na príslušenstvo, ktoré podlieha bežnému opotrebovaniu (manžeta, batérie atď.).
- Takisto je potom vylúčená záruka na priame alebo nepriame následné škody spôsobené prístrojom, keď sa pri poškodení prístroja uzná nárok na záruku.

Chyby a zmeny vyhradené

إرشادات عامة

- الحد الأقصى لقوة الحمل يبلغ 180 كجم (396 رطل / 28 جر)، التردد 50 جرام (0,1 lb / 0,005 st)

التقطيف: يمكنك تنظيف الميزان باستخدام قطعة قماش خالية من الوبر وبملائلاً. ولا تقم بشطفه أبداً تحت ماء جار.

احرص على حماية الميزان من التعرض للصدمات والرطوبة والأتربة والغبار والمواد الكيميائية والتقلبات الشديدة في درجات الحرارة والمجالات الكهرومغناطيسية وكذلك عدم وضعه بالقرب من مصادر الحرارة.

- لا تتصعد أبداً من جانب واحد على الحافة الخارجية للميزان: خطير الانقلاب!

• أبعد الأطفال عن مواد التغليف!
• الميزان غير مخصص للاستخدام التجاري.

إذا كانت لديك استفسارات حول استخدام الجهاز الخاص بنا، من فضلك توجه إلى الموزع الذي تتعامل معه أو إلى مركز خدمة العملاء. قم بفحص البطاريات قبل أي شكوى، وقم بتغييرها إذا لزم الأمر. لا يجوز إجراء أعمال الإصلاحات إلا لدى مركز خدمة العملاء أو أحد المتأجري المعتمدة.

إرشادات التعامل مع البطاريات

- إذا تلامس السائل الخارج من خلية البطارية مع الجلد أو العين، فينبعي غسل المنطقة المصابة بالماء وطلب المساعدة الطبية.



الضمان / الخدمة

لمطالبات الضمان يرجى التوجه إلى المتجر أو الفرع المحلي الذي تتعامل معه (راجع قائمة الخدمة الدولية).

أ درجاع الجهاز، قم بإلقاء نسخة من إيصال الشراء ووصف مختصر للعيب.

تطبيقات شروط الضمان التالية:

1. فترة الضمان لمنتجات BEURER تبلغ 5 أعوام أو إذا كانت أطول - تكون

فترة الضمان السارية في البلد المعنى من تاريخ الشراء هي التي يعتد بها عند المطالبة بالضمان، يجب إثبات تاريخ الشراء من خلال إيصال شراء أو فاتورة.

2. لا ينعد فترة الضمان بسب الإصلاحات (جهاز كامل أو أجزاء منه).

3. لا يسري الضمان على الأضرار الناجمة عن:

أ. سوء التعامل، على سبيل المثال، عدم الامتثال لتعليمات المستخدم.

ب. إصلاحات أو تغييرات من جانب العميل أو شخص غير مصرح لهم.

ج. النقل من الشركة المنتجة إلى العميل أو أثناء النقل إلى مركز الخدمة.

د. لا يسري الضمان على الملحقات التكميلية التي تخضع للنائل العادي (الأسرة والبطاريات وغيرها).

4. يتم استبعاد المسؤولية عن الأضرار اللاحقة المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن الجهاز، حتى لو تم اعتماد مطالبة الضمان في حالة ثالف الجهاز.

ما عدا السقوط والخطأ، كما يختلف بحق إجراء تغييرات

التخلص من البطاريات

- يجب عليك التخلص من البطاريات المستهلكة أو فارغة الشحنة تماماً عن طريق إلقائها في حاويات مهملات مميزة بشكل خاص أو عن طريق تسليمها لمستودعات تجميع القمامه الخاصة أو من خلال إرجاعها إلى متاجر الأجهزة الكهربائية، حيث أنك مطالب بالتخليص من البطاريات بموجب القانون.



Pb Cd Hg

- تجد هذه المعلومات على البطاريات المحتوية على مواد ضارة:

Pb = بطارية تحتوي على الرصاص,
Cd = بطارية تحتوي على الكادميوم,
Hg = بطارية تحتوي على الزئبق.

التخلص العام

- حفاظ على البيئة لا يجوز التخلص من الجهاز بعد انتهاء العمر الافتراضي له ضمن القمامه المنزلية. يمكن التخلص من الجهاز من خلال تسليمه لمستودعات التجميع المعنية في بلدك.
- تخلص من الجهاز طبقاً لمواصفة المجموعة الأوروبية - WEEE (التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة). في حالة وجود أي استفسارات توجة إلى الجهة المحلية المسؤولة عن التخلص من الأجهزة القديمة.



التخلص من مواد التعبئة والتغليف على نحو صديق للبيئة PAP

